




Coffres de sécurité modulaires produits inflammables et produits corrosifs



- **socle en option** : les combinaisons socle + coffre s'adaptent à toutes les configurations de hauteur externe
 - hauteur ext. 620 mm : coffre h620 mm sans socle
 - hauteur ext. 700 mm : coffre h620 mm + socle h80 mm
 - hauteur ext. 720 mm : coffre h720 mm sans socle
 - hauteur ext. 800 mm : coffre h720 mm + socle h80 mm

Caissons de ventilation / filtration en option


- les coffres peuvent être équipés de caissons de ventilation avec filtration intégrée
- extraction des vapeurs au choix, vers l'extérieur du bâtiment ou dans le local
- caissons livrés avec tous les éléments nécessaires à leur montage, installation à gauche, à droite ou à l'arrière du coffre
- avec un **kit de raccordement**, un seul caisson de ventilation/filtration peut servir pour 2 ou 3 coffres montés en ligne
- **LMD492 - ventilation** : extraction des vapeurs vers l'extérieur, prédisposition pour installer un filtre, dim. caisson 260 x p430 x h270 mm (filtre et gaine d'évacuation vers l'extérieur en option)
- **LMD497 - ventilation-filtration à recyclage d'air filtré** : les vapeurs sont recyclées par un filtre au charbon actif (3 filtres au choix en option) dim. caisson 365 x p530 x h650 mm
- **LMD490** - même caractéristiques que LMD497, avec alarme, conforme à la norme NFX15211

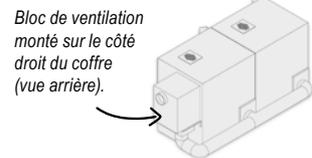

Bloc de ventilation monté sur le côté droit du coffre (vue arrière).



| | référence | Prix HT |
|--|------------|---------|
| caissons de ventilation | | |
| ventilation standard sans filtre, rejet extérieur | LMD492 [1] | |
| ventilation-filtration à recyclage d'air filtré non certifiée | LMD496 [2] | |
| ventilation-filtration à recyclage d'air filtré NFX15211 | LMD497 | |
| gaine d'évacuation pour rejet à l'extérieur | | |
| gaine d'évacuation souple en PVC Ø102 mm, le mètre | AC510 | |
| filtres au charbon actif (7 kg) | | |
| filtre pour acides | LMD902 | |
| filtre pour acides / solvants | LMD903 | |
| filtre pour solvants | LMD904 | |
| préfiltre anti-poussière | LMD901 | |
| Kits de raccordement et de montage pour plusieurs coffres en ligne | | |
| kit de raccordement pour 2 coffres en ligne | LMD397 | |
| kit de raccordement pour 3 coffres en ligne | LMD398 | |

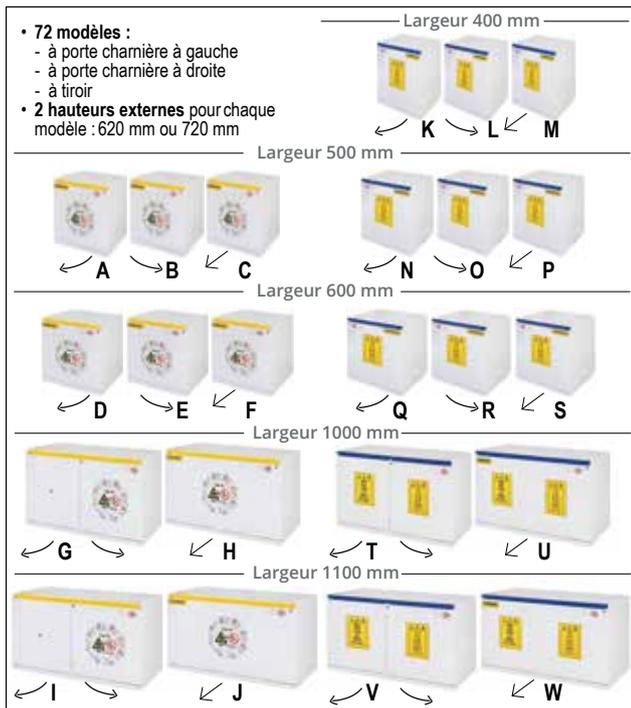

Coffres pour produits inflammables certifiés EN14470-1 90 minutes



- coffres certifiés EN 14470-1 et EN 14727, résistance au feu 90 minutes
- **construction** : tôle d'acier verni résistant aux produits chimiques et à la corrosion, revêtement époxy d'épaisseur 90 µm
- **panneaux d'isolation** en sulfate de calcium haute densité (300 kg/m³), résistance supérieure à +800°C
- **fermeture automatique de la porte ou du tiroir** en cas de température ambiante supérieure à +47°C, par fusible thermique
- charnières anti-étincelles
- borne de mise à la terre
- joint thermo-dilatant (suivant DIN1402)
- pieds réglables en hauteur
- **serrure de porte**
- bac de rétention avec caillebotis
- **ventilation** : circulation naturelle, raccord de ventilation Ø100 mm pour ventilation/filtration forcée en option
- clapets de ventilation certifiés, fermeture automatique lorsque la température dépasse +70°C

Coffres pour produits corrosifs



- coffres conformes aux normes EN 14727 et EN 61010
- modèles spécifiques pour acides ou pour bases
- **construction** : tôle d'acier verni résistant aux produits chimiques et à la corrosion, revêtement époxy d'épaisseur < 90 µm
- **intérieur** en panneaux mélaminés hydrofuges résistant aux acides et aux vapeurs corrosives
- **2 étagères** en acier, avec possibilité de rétention de capacité 7 litres, 3 étagères max./coffre
- charge max. : 80 kg par étagère
- charnières anti-étincelles
- pieds réglables en hauteur
- **serrure de porte**
- **ventilation** : circulation naturelle, raccord de ventilation Ø100 mm, circulation forcée et filtration par ventilateur en option



Coffres à combinaisons universelles,
72 modèles pour des centaines de combinaisons.

Coffres pour produits inflammables - certifiés EN14470-1 / 90 minutes - 1 ou 2 compartiments

| largeur | capacité | rétention | dim. internes (l x p) | dim. externes (l x p) | type | poids | rep. | référence | | Prix HT | référence | | Prix HT |
|---------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------|--|--|---------|--|--|---------|
| | | | | | | | | hauteur externe 620 mm hauteur interne 493 mm | | | hauteur externe 720 mm hauteur interne 593 mm | | |
| 500 mm | 12 x 1 litre | 5 litres | 383 x p349 mm | 495 x p520 mm | 1 porte charnière à gauche | 78 kg | A | - | | | LMF1117 | | |
| | | | | | 1 porte charnière à droite | 78 kg | B | LMF110 | | | - | | |
| | | | | | 1 tiroir | 78 kg | C | LMF112 | | | - | | |
| 600 mm | 15 x 1 litre | 6 litres | 483 x p349 mm | 595 x p520 mm | 1 porte charnière à gauche | 87 kg | D | LMF114 | | | LMF1147 | | |
| | | | | | 1 porte charnière à droite | 87 kg | E | LMF113 | | | LMF1137 | | |
| | | | | | 1 tiroir | 87 kg | F | LMF115 | | | LMF1157 | | |
| 1000 mm | 27 x 1 litre | 12 litres | 878 x p349 mm | 995 x p520 mm | 2 portes | 125 kg | G | LMF116 | | | LMF1167 | | |
| | | | | | 1 tiroir | 125 kg | H | LMF117 | | | LMF1177 | | |
| 1100 mm | 30 x 1 litre | 13 litres | 978 x p349 mm | 1095 x p520 mm | 2 portes | 139 kg | I | LMF118 | | | LMF1187 | | |
| | | | | | 1 tiroir | 139 kg | J | LMF119 | | | LMF1197 | | |

Coffres 1 compartiment pour acides ou bases

| largeur | capacité | dim. int. (l x p) | dim. ext. (l x p) | type | poids | rep. | référence | | Prix HT | référence | | Prix HT |
|---------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------|------|--|--------|---------|--|---------|---------|
| | | | | | | | hauteur externe 620 mm hauteur interne 530 mm | | | hauteur externe 720 mm hauteur interne 630 mm | | |
| | | | | | | | acide | base | | acide | base | |
| 400 mm | 18 x 1 litre | 330 x p410 mm | 395 x p520 mm | 1 porte charnière à gauche | 54 kg | K | LMF121 | LMF131 | | LMF1217 | LMF1317 | |
| | 18 x 1 litre | | | 1 porte charnière à droite | 54 kg | L | LMF120 | LMF130 | | LMF1207 | LMF1307 | |
| | 9 x 1 litre | | | 1 tiroir | 54 kg | M | LMF122 | LMF132 | | LMF1227 | LMF1327 | |
| 500 mm | 24 x 1 litre | 430 x p410 mm | 495 x p520 mm | 1 porte charnière à gauche | 56 kg | N | LMF200 | LMF203 | | LMF2007 | LMF2037 | |
| | 24 x 1 litre | | | 1 porte charnière à droite | 56 kg | O | LMF201 | LMF204 | | LMF2017 | LMF2047 | |
| | 12 x 1 litre | | | 1 tiroir | 56 kg | P | LMF202 | LMF205 | | LMF2027 | LMF2057 | |
| 600 mm | 30 x 1 litre | 530 x p410 mm | 595 x p520 mm | 1 porte charnière à gauche | 58 kg | Q | LMF124 | LMF134 | | LMF1247 | LMF1347 | |
| | 30 x 1 litre | | | 1 porte charnière à droite | 58 kg | R | LMF123 | LMF133 | | LMF1237 | LMF1337 | |
| | 15 x 1 litre | | | 1 tiroir | 58 kg | S | LMF125 | LMF135 | | LMF1257 | LMF1357 | |

Coffres 2 compartiments pour acides / bases

| largeur | capacité | dim. int. (l x p) | dim. ext. (l x p) | type | poids | rep. | référence | | Prix HT | référence | | Prix HT |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|------|--|--|---------|--|--|---------|
| | | | | | | | hauteur externe 620 mm hauteur interne 530 mm | | | hauteur externe 720 mm hauteur interne 630 mm | | |
| 1000 mm | 2 x 18 x 1 litre | 860 x p410 mm | 995 x p520 mm | 2 portes / 2 compartiments | 108 kg | T | LMF210 | | | LMF2107 | | |
| | 2 x 9 x 1 litre | | | 1 tiroir / 2 compartiments | 108 kg | U | LMF211 | | | LMF2117 | | |
| 1100 mm | 2 x 24 x 1 litre | 960 x p410 mm | 1095 x p520 mm | 2 portes / 2 compartiments | 114 kg | V | LMF220 | | | LMF2207 | | |
| | 2 x 12 x 1 litre | | | 1 tiroir / 2 compartiments | 114 kg | W | LMF221 | | | LMF2217 | | |

Étagères supplémentaires

| | matériau | pour coffres largeur 400 mm | pour coffres largeur 500 mm | pour coffres largeur 600 mm | pour coffres largeur 1000 mm | pour coffres largeur 1100 mm |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| étagère suppl. compartiment inflammable | acier peint époxy | - | LMF420 | LMF430 | LMF440 | LMF450 |
| étagère suppl. compartiment acides | acier peint époxy | LMF411 | LMF421 | LMF431 | LMF441 ⁽¹⁾ | LMF451 ⁽³⁾ |
| étagère suppl. compartiment bases | acier inox | LMF412 | LMF422 | LMF432 | LMF442 ⁽²⁾ | LMF452 ⁽⁴⁾ |

⁽¹⁾ Étagère larg. 418 mm pour compartiments acides. ⁽²⁾ Étagère larg. 450 mm pour compartiments bases. ⁽³⁾ Étagère larg. 468 mm pour compartiments acides. ⁽⁴⁾ Étagère larg. 500 mm pour compartiments bases.

Socles universels (combinaisons possibles pour chaque socle)

| largeur utile | combinaison 1 | combinaison 2 | combinaison 3 | combinaison 4 | combinaison 5 | dimensions socle | poids | référence | Prix HT |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------|-----------|---------|
| 400 mm | 1 x 400 | - | - | - | - | 400 x p500 x h80 mm | 2,4 kg | LMF400 | |
| 500 mm | 1 x 500 | - | - | - | - | 500 x p500 x h80 mm | 2,5 kg | LMF500 | |
| 600 mm | 1 x 600 | - | - | - | - | 600 x p500 x h80 mm | 2,7 kg | LMF600 | |
| 800 mm | 2 x 400 | - | - | - | - | 800 x p500 x h80 mm | 3,2 kg | LMF800 | |
| 900 mm | 1 x 500 + 1 x 400 | - | - | - | - | 900 x p500 x h80 mm | 3,4 kg | LMF900 | |
| 1000 mm | 1 x 1000 | 2 x 500 | 1 x 600 + 1 x 400 | - | - | 1000 x p500 x h80 mm | 3,6 kg | LMF1000 | |
| 1100 mm | 1 x 1100 | 1 x 500 + 1 x 600 | - | - | - | 1100 x p500 x h80 mm | 3,8 kg | LMF1100 | |
| 1200 mm | 3 x 400 | 2 x 600 | - | - | - | 1200 x p500 x h80 mm | 4,0 kg | LMF1200 | |
| 1400 mm | 1 x 1000 + 1 x 400 | 2 x 500 + 1 x 400 | 1 x 600 + 2 x 400 | - | - | 1400 x p500 x h80 mm | 4,5 kg | LMF1400 | |
| 1500 mm | 1 x 1100 + 1 x 400 | 1 x 1000 + 1 x 500 | 1 x 600 + 1 x 500 + 1 x 400 | 3 x 500 | - | 1500 x p500 x h80 mm | 4,8 kg | LMF1500 | |
| 1600 mm | 1 x 1100 + 1 x 500 | 1 x 1000 + 1 x 600 | 2 x 500 + 1 x 600 | 2 x 600 + 1 x 400 | 4 x 400 | 1600 x p500 x h80 mm | 7,0 kg | LMF1600 | |
| 1700 mm | 1 x 1100 + 1 x 600 | 2 x 600 + 1 x 500 | - | - | - | 1700 x p500 x h80 mm | 7,5 kg | LMF1700 | |
| 1800 mm | 1 x 1000 + 2 x 400 | 2 x 500 + 2 x 400 | 3 x 600 | - | - | 1800 x p500 x h80 mm | 8,0 kg | LMF1800 | |