



Mini Rouleur 5 rouleaux
vitesse réglable

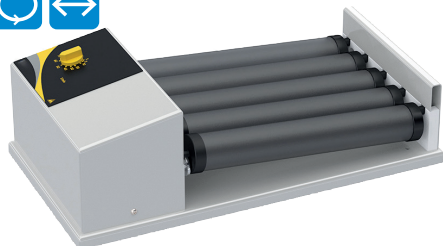

- mélange homogène du contenu des tubes ou des flacons
- mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux
- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm
- rouleaux en PVC
- charge max.: 5 kg

vitesse	4 à 30 tr/min
rouleaux	long. 216 mm
type rouleau	rouleaux fixes
protection	IP32
dim. / poids	180 x 340 x h113 mm / 3 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rouleur	ROL520


Rouleur 5 rouleaux
vitesse fixe

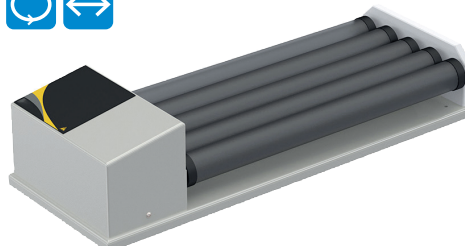

- mélange homogène du contenu des tubes ou des flacons
- mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux
- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm
- rouleaux en PVC
- charge max.: 5 kg

vitesse	fixe 40 tr/min
rouleaux	long. 334 mm
type rouleau	rouleaux fixes
protection	IP32
dim. / poids	180 x 480 x h113 mm / 3,7 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rouleur	ROL510

Rouleurs 5 rouleaux
vitesse réglable

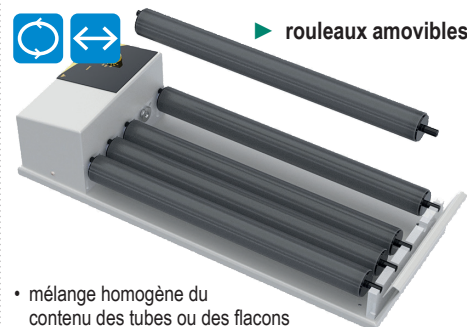

▶ rouleaux amovibles

- mélange homogène du contenu des tubes ou des flacons
- mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux
- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm
- rouleaux en PVC
- charge max.: 5 kg

vitesse	4 à 30 tr/min	10 à 70 tr/min
rouleaux	long. 330 mm	
type rouleau	rouleaux amovibles	
protection	IP32	
dim. / poids	180 x 480 x h113 mm / 3,7 kg	
alimentation	230 V / 50 Hz	
Rouleurs	ROL530	ROL540

Rouleurs 6 rouleaux vitesse réglable



modèle digital


1

2

vitesse	réglable 10 à 70 tr/min
rouleaux	longueur 340 mm
amplitude	24 mm
protection	IP21
dim. / poids	260 x 530 x h120 mm / 5 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rouleur éco.	ROL610 1
Rouleur digital	ROL620 2

- mélange parfaitement homogène du contenu de tubes ou flacons
- les tubes ou les flacons sont soumis à un mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient
- capacité maximum : 5 kg
- modèle digital avec minuteur 1 à 1199 minutes et affichage digital LCD vitesse et temps

Rouleurs 10 rouleaux vitesse réglable

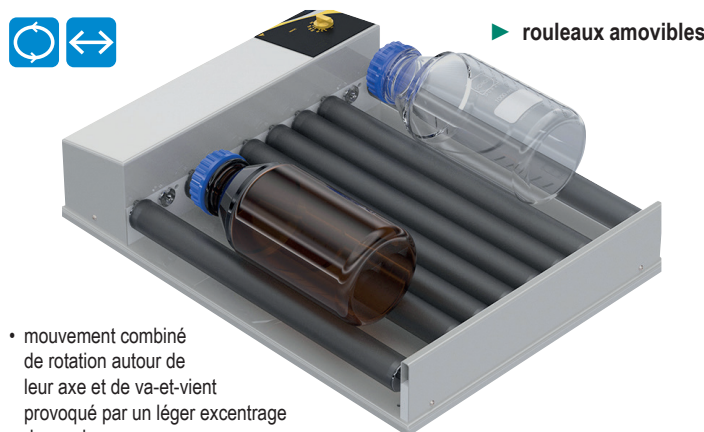

▶ rouleaux amovibles

- mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux
- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm
- rouleaux en PVC
- capacité maximum : 5 kg

vitesse	réglable 4 à 30 tr/min	réglable 10 à 70 tr/min
rouleaux	longueur 330 mm	
type rouleau	amovibles	
protection	IP32	
dim. / poids	360 x 480 x h113 mm / 6,5 kg	
alimentation	230 V / 50 Hz	
Rouleurs	ROL1030	ROL1040